

溶出試験


アルジオキサ顆粒50%「ツルハラ」の溶出は、日本薬局方医薬品各条に定められたアルジオキサ顆粒の溶出規格に適合していることが確認されている。

試験方法：溶出試験法第2法（パドル法）

回転数：毎分50回転

試験液：水

溶出規格：15分 85%以上

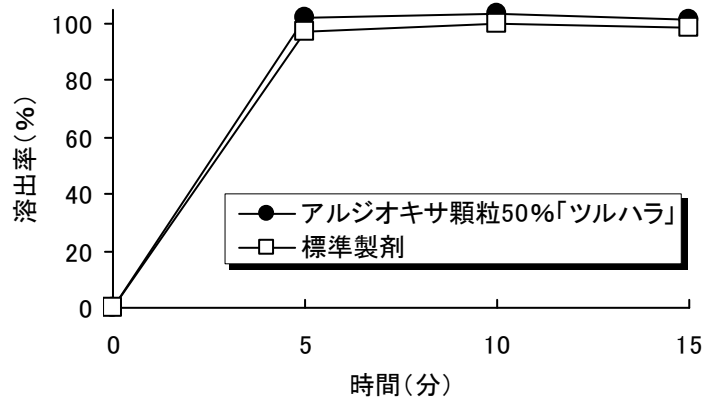

アルジオキサ顆粒50%「ツルハラ」につき、標準製剤を対照として、下記に示す4種試験液を用いて溶出試験を実施した。

試験結果

標準製剤を対照としたアルジオキサ顆粒50%「ツルハラ」の溶出試験結果を図1～4にそれぞれ示す。アルジオキサ顆粒50%「ツルハラ」の溶出パターンは、標準製剤と同等であった。

