

溶出試験


オキサトミドドライシロップ小児用2%「ツルハラ」の溶出は、日本薬局方外医薬品規格第3部「オキサトミドドライシロップ」の判定基準に適合した。(オレンジブック No.8 掲載)

試験方法：溶出試験法第2法（パドル法）

回転数：毎分50回転

試験液：pH5.5のリン酸水素二ナトリウム・クエン酸緩衝液

溶出規格：60分 70%以上

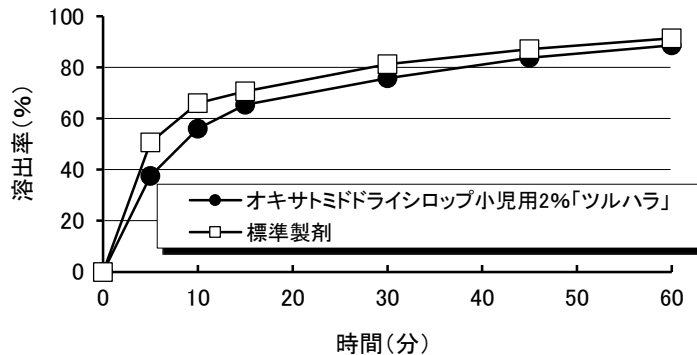

オキサトミドドライシロップ小児用2%「ツルハラ」につき、標準製剤を対照として、下記に示す4種試験液を用いて溶出試験を実施した。

試験結果

標準製剤を対照としたオキサトミドドライシロップ小児用2%「ツルハラ」の溶出試験結果を下図にそれぞれ示す。オキサトミドドライシロップ小児用2%「ツルハラ」の溶出パターンは、標準製剤と同等であった。

